

GE Healthcare

Discovery MR450 Mechanical Dock Upgrade

Technical Publication



5500112
Rev 1

DAMAGE IN TRANSPORTATION

All packages should be closely examined at time of delivery. If damage is apparent, have notation “**damage in shipment**” written on **all** copies of the freight or express bill **before** delivery is accepted or “signed for” by a General Electric representative or a hospital receiving agent. Whether noted or concealed, damage **MUST** be reported to the carrier **immediately** upon discovery, or in any event, within **14** days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier. A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this **14** day period.

File a report with

- Call 1–800–548–3366 and use option 8.
- Contact your local service coordinator for more information on this process.

Rev. 08/15/2003

© 2009 General Electric Company
GE Medical Systems, a General Electric Company, going to market as GE Healthcare
3000 N. Grandview Boulevard
Waukesha, Wisconsin 53188
USA

www.gehealthcare.com



TABLE OF CONTENTS

<u>SECTION</u>	<u>PAGE</u>
TABLE OF CONTENTS	1
REVISION HISTORY	3
LANGUAGE POLICY	5
SECTION 1 – GETTING STARTED	
1-1 INTRODUCTION	15
1-2 REQUIRED TOOLS	15
1-3 DAMAGE IN TRANSPORTATION	15
1-4 PRODUCT LOCATOR	16
SECTION 2 – INSTALLATION PROCEDURE	
2-1 SAFETY	17
2-2 DOCK REMOVAL	17
2-3 INSTALLATION OF NEW 32-CHANNEL DOCK	20
2-4 ALTERNATE CABLE INSTALLATION	23
2-5 POWER UP	23
SECTION 3 – COMPLETION CHECKLIST	
3-1 MECHANICAL INSTALLATION COMPLETION	24
3-2 GE FIELD ENGINEER RESPONSIBILITIES	24

This page left blank intentionally

REVISION HISTORY

REV	DATE	PRIMARY REASON FOR CHANGE
-----	------	---------------------------

1	21 Apr 2009	Preliminary release for verification.
---	-------------	---------------------------------------

This page left blank intentionally

LANGUAGE POLICY

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(BG)

- ТОВА УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА Е НАЛИЧНО САМО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.
- АКО ДОСТАВЧИКЪТ НА УСЛУГАТА НА КЛИЕНТА ИЗИСКА ЕЗИК, РАЗЛИЧЕН ОТ АНГЛИЙСКИ, ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА КЛИЕНТА Е ДА ОСИГУРИ ПРЕВОД.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБОРУДВАНЕТО ПРЕДИ ДА СТЕ СЕ КОНСУЛТИРАЛИ И РАЗБРАЛИ УПЪТВАНЕТО ЗА РАБОТА.
- НЕСПАЗВАНЕТО НА ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА, ОПЕРАТОРА ИЛИ ПАЦИЕНТ В РЕЗУЛТАТ НА ТОКОВ УДАР ИЛИ МЕХАНИЧНА ИЛИ ДРУГА ОПАСНОСТ.

警告

(ZH-CN)

- 本维修手册仅提供英文版本。
- 如果维修服务提供商需要非英文版本，客户需自行提供翻译服务。
- 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。
- 忽略本警告可能对维修人员，操作员或患者造成触电、机械伤害或其他形式的伤害。

VÝSTRAHA

(CS)

- TENTO PROVOZNÍ NÁVOD EXISTUJE POUZE V ANGLICKÉM JAZYCE.
- V PŘÍPADĚ, ŽE EXTERNÍ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM POTŘEBUJE NÁVOD V JINÉM JAZYCE, JE ZAJIŠTĚNÍ PŘEKladU DO ODPOVÍDAJÍCÍHO JAZYKA ÚKOLEM ZÁKAZNÍKA.
- NESNAŽTE SE O ÚDRŽBU TOHOTO ZAŘÍZENÍ, ANIŽ BYSTE SI PŘEČETLI TENTO PROVOZNÍ NÁVOD A POCHOPILI JEHO OBSAH.
- V PŘÍPADĚ NEDODRŽOVÁNÍ TÉTO VÝSTRAHY MŮŽE DOJÍT K PORANĚNÍ PRACOVNÍKA PRODEJNÍHO SERVISU, OBSLUŽNÉHO PERSONÁLU NEBO PACIENTŮ Vlivem ELEKTRICKÉHO PROUDU, RESPEKTIVE Vlivem MECHANICKÝCH ČI JINÝCH RIZIK.

ADVARSEL

(DA)

- DENNE SERVICEMANUAL FINDES KUN PÅ ENGELSK.
- HVIS EN KUNDES TEKNIKER HAR BRUG FOR ET ANDET SPROG END ENGELSK, ER DET KUNDENS ANSVAR AT SØRGE FOR OVERSÆTTELSE.
- FORSØG IKKE AT SERVICERE Udstyret medmindre DENNE SERVICEMANUAL HAR VÆRET KONSULTERET OG ER FORSTÅET.
- MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE ADVARSEL KAN MEDFØRE SKADE PÅ GRUND AF ELEKTRISK, MEKANISK ELLER ANDEN FARE FOR TEKNIKEREN, OPERATØREN ELLER PATIENTEN.

WAARSCHUWING

(NL)

- DEZE ONDERHOUDSHANDLEIDING IS ENKEL IN HET ENGELS VERKRIJGBAAR.
- ALS HET ONDERHOUDSPERSONEEL EEN ANDERE TAAL VEREIST, DAN IS DE KLANT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERTALING ERVAN.
- PROBEER DE APPARATUUR NIET TE ONDERHOUDEN VOORDAT DEZE ONDERHOUDSHANDLEIDING WERD GERAADPLEEGD EN BEGREPEN IS.
- INDIEN DEZE WAARSCHUWING NIET WORDT OPGEVOLGD, ZOU HET ONDERHOUDSPERSONEEL, DE OPERATOR OF EEN PATIËNT GEWOND KUNNEN RAKEN ALS GEVOLG VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK, MECHANISCHE OF ANDERE GEVAREN.
- THIS SERVICE MANUAL IS AVAILABLE IN ENGLISH ONLY.

WARNING

(EN)

- IF A CUSTOMER'S SERVICE PROVIDER REQUIRES A LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH, IT IS THE CUSTOMER'S RESPONSIBILITY TO PROVIDE TRANSLATION SERVICES.
- DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE EQUIPMENT UNLESS THIS SERVICE MANUAL HAS BEEN CONSULTED AND IS UNDERSTOOD.
- FAILURE TO HEED THIS WARNING MAY RESULT IN INJURY TO THE SERVICE PROVIDER, OPERATOR, OR PATIENT FROM ELECTRIC SHOCK, OR FROM MECHANICAL OR OTHER HAZARDS.

HOIATUS

(ET)

- KÄESOLEV TEENINDUSJUHEK ON SAADAVAL AINULT INGLISE KEELES.
- KUI KLIENDITEENINDUSE OSUTAJA NÕUAB JUHENDIT INGLISE KEELEST ERINEVAS KEELES, VASTUTAB KLIENT TÕLKETEENUSE OSUTAMISE EEST.
- ÄRGE ÜRITAGE SEADMEID TEENINDADA ENNE EELNEVALT KÄESOLEVA TEENINDUSJUHEKIGA TUTVUMIST JA SELLEST ARU SAAMIST.

VAROITUS

(FI)

- KÄESOLEVA HOIATUSE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TEENUSEOSUTAJA, OPERAATORI VÕI PATSIENDI VIGASTAMIST ELEKTRILÖÖGI, MEHAANILISE VÕI MUU OHU TAGAJÄRJEL.
- TÄMÄ HUOLTO-OHJE ON SAATAVILLA VAIN ENGLANNIKSI.
- JOS ASIAKKAAN HUOLTOHENKILÖSTÖ VAATII MUUTA KUIN ENGLANNINKIELISTÄ MATERIAALIA, TARVITTAVAN KÄÄNNÖKSEN HANKKIMINEN ON ASIAKKAAN VASTUULLA.
- ÄLÄ YRITÄ KORJATA LAITTEISTOA ENNEN KUIN OLET VARMASTI LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT TÄMÄN HUOLTO-OHJEEN.
- MIKÄLI TÄTÄ VAROITUSTA EI NOUDATETA, SEURAUKSENA VOI OLLA HUOLTOHENKILÖSTÖN, LAITTEISTON KÄYTTÄJÄN TAI POTILAAN VAHINGOITTUMINEN SÄHKÖISKUN, MEKAANISEN VIAN TAI MUUN VAARATILANTEEN VUOKSI.

ATTENTION

(FR)

- CE MANUEL DE SERVICE N'EST DISPONIBLE QU'EN ANGLAIS.
- SI LE TECHNICIEN DU CLIENT A BESOIN DE CE MANUEL DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, C'EST AU CLIENT QU'IL INCOMBE DE LE FAIRE TRADUIRE.
- NE PAS TENTER D'INTERVENIR SUR LES EQUIPEMENTS TANT QUE LE MANUEL SERVICE N'A PAS ETE CONSULTE ET COMPRIS
- LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ LE TECHNICIEN, L'OPÉRATEUR OU LE PATIENT DES BLESSURES DUES À DES DANGERS ÉLECTRIQUES, MÉCANIQUES OU AUTRES.

WARNUNG

(DE)

- DIESE SERVICEANLEITUNG EXISTIERT NUR IN ENGLISCHER SPRACHE.
- FALLS EIN FREMDER KUNDENDIENST EINE ANDERE SPRACHE BENÖTIGT, IST ES AUFGABE DES KUNDEN FÜR EINE ENTSPRECHENDE ÜBERSETZUNG ZU SORGEN.
- VERSUCHEN SIE NICHT DIESE ANLAGE ZU WARTEN, OHNE DIESE SERVICEANLEITUNG GELESEN UND VERSTANDEN ZU HABEN.
- WIRD DIESE WARNUNG NICHT BEACHTET, SO KANN ES ZU VERLETZUNGEN DES KUNDENDIENSTTECHNIKERS, DES BEDIENERS ODER DES PATIENTEN DURCH STROMSCHLÄGE, MECHANISCHE ODER SONSTIGE GEFAHREN KOMMEN.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

(EL)

- ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΡΒΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΝΟ.
- ΕΑΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΝΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΕΡΒΙΣ.
- ΕΑΝ ΔΕ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Ή ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ.

FIGYELMEZTETÉS

(HU)

- EZEN KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG ANGOL NYELVEN ÉRHEŐ EL.
- HA A VEVŐ SZOLGÁLTATÓJA ANGOLTÓL ELTÉRŐ NYELVRE TART IGÉNYT, AKKOR A VEVŐ FELELŐSSÉGE A FORDÍTÁS ELKÉSZÍTTETÉSE.
- NE PRÓBÁLJA ELKEZDENI HASZNÁLNI A BERENDEZÉST, AMÍG A KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYVBEN LEÍRTAKAT NEM ÉRTELMEZTÉK.
- EZEN FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA A SZOLGÁLTATÓ, MŰKÖDTETŐ VAGY A BETEG ÁRAMÚTÉS, MECHANIKAI VAGY EGYÉB VESZÉLYHELYZET MIATTI SÉRÜLÉSÉT EREDMÉNYEZHETI.

AÐVÖRUN

(IS)

- ÞESSI ÞJÓNUSTUHANDBÓK ER EINGÖNGU FÁANLEG Á ENSKU.
- EF AÐ ÞJÓNUSTUVEITANDI VIÐSKIPTAMANNS ÞARFNAST ANNAS TUNGUMÁLS EN ENSKU, ER ÞAÐ SKYLDA VIÐSKIPTAMANNS AÐ SKAFFA TUNGUMÁLAPJÓNUSTU.
- REYNIÐ EKKI AÐ AFGREIÐA TÆKIÐ NEMA AÐ ÞESSI ÞJÓNUSTUHANDBÓK HEFUR VERIÐ SKOÐUÐ OG SKILIN.
- BROT Á SINNA ÞESSARI AÐVÖRUN GETUR LEITT TIL MEIÐSLA Á ÞJÓNUSTUVEITANDA, STJÓRNANDA EÐA SJÚKLINGS FRÁ RAFLOSTI, VÉLRÆNU EÐA ÖÐRUM ÁHÆTTUM.

AVVERTENZA

(IT)

- IL PRESENTE MANUALE DI MANUTENZIONE E DISPONIBILE SOLTANTO IN INGLESE.
- SE UN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ESTERNO ALLA GEMS RICHIEDE IL MANUALE IN UNA LINGUA DIVERSA, IL CLIENTE E TENUTO A PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA TRADUZIONE.
- SI PROCEDA ALLA MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIATURA SOLO DOPO AVER CONSULTATO IL PRESENTE MANUALE ED AVERNE COMPRESO IL CONTENUTO
- IL NON RISPETTO DELLA PRESENTE AVVERTENZA POTREBBE FAR COMPIERE OPERAZIONI DA CUI DERIVINO LESIONI ALL'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE, ALL'UTILIZZATORE ED AL PAZIENTE PER FOLGORAZIONE ELETTRICA, PER URTI MECCANICI OD ALTRI

警告

(JA)

- このサービスマニュアルには英語版しかありません。
- サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。
- このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。
- この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。

경고

(KO)

- 본 서비스 지침서는 영어로만 이용하실 수 있습니다.
- 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우, 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다.
- 본 서비스 지침서를 참고했고 이해하지 않는 한은 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오.
- 이 경고에 유의하지 않으면 전기 쇼크, 기계상의 혹은 다른 위험으로부터 서비스 제공자, 운영자 혹은 환자에게 위해를 가할 수 있습니다.

BRĪDINĀJUMS

(LV)

- ŠĪ APKALPES ROKASGRĀMATA IR PIEEJAMA TIKAI ANGLŪ VALODĀ.
- JA KLIENTA APKALPES SNIEDZĒJAM NEPIECIEŠAMA INFORMĀCIJA CITĀ VALODĀ, NEVIS ANGLŪ, KLIENTA PIENĀKUMS IR NODROŠINĀT TULKOŠANU.
- NEVEICIET APRĪKOJUMA APKALPI BEZ APKALPES ROKASGRĀMATAS IZLASĪŠANAS UN SAPRAŠANAS.
- ŠĪ BRĪDINĀJUMA NEIEVĒROŠANA VAR RADĪT ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, MEHĀNISKU VAI CITU RISKU IZRAISĪTU TRAUMU APKALPES SNIEDZĒJAM, OPERATORAM VAI PACIENTAM.

ISPĒJIMAS

(LT)

- ŠIS EKSPLOATAVIMO VADOVAS YRA PRIEINAMAS TIK ANGLŪ KALBA.
- JEI KLIENTO PASLAUGŪ TIEKĒJAS REIKALAUJA VADOVO KITA KALBA – NE ANGLŪ, NUMATYTI VERTIMO PASLAUGAS YRA KLIENTO ATSAKOMYBĒ.
- NEMĒGINKITE ATLIKTI ĮRANGOS TECHINĖS PRIEŽIŪROS, NEBENT ATSIŽVELGĖTE Į ŠĮ EKSPLOATAVIMO VADOVĄ IR JĮ SUPRATOTE.
- JEI NEATKREIPSITE DĖMESIO Į ŠĮ PERSPĖJIMĄ, GALIMI SUŽALOJIMAI DĖL ELEKTROS ŠOKO,
- MECHANINIŲ AR KITŲ PAVOJŲ PASLAUGŲ TIEKĖJUI, OPERATORIUI AR PACIENTUI.

ADVARSEL

(NO)

- DENNE SERVICEHÅNDBOKEN FINNES BARE PÅ ENGELSK.
- HVIS KUNDENS SERVICELEVERANDØR TRENGER ET ANNET SPRÅK, ER DET KUNDENS ANSVAR Å SØRGE FOR OVERSETTELSE.
- IKKE FORSØK Å REPARERE UTSTYRET UTEN AT DENNE SERVICEHÅNDBOKEN ER LEST OG FORSTÅTT.
- MANGLENDE HENSYN TIL DENNE ADVARSELEN KAN FØRE TIL AT SERVICELEVERANDØREN, OPERATØREN ELLER PASIENTEN SKADES PÅ GRUNN AV ELEKTRISK STØT, MEKANISKE ELLER ANDRE FARER.

OSTRZEŻENIE

(PL)

- NINIEJSZY PODRĘCZNIK SERWISOWY DOSTĘPNY JEST JEDYNIIE W JĘZYKU ANGIELSKIM.
- JEŚLI DOSTAWCA USŁUG KLIENTA WYMAGA JĘZYKA INNEGO NIŻ ANGIELSKI, ZAPEWNIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA JEST OBOWIĄZKIEM KLIENTA.
- NIE PRÓBOWAĆ SERWISOWAĆ WYPOSAŻENIA BEZ ZAPOZNANIA SIĘ I ZROZUMIENIA NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA SERWISOWEGO.
- NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ URAZY DOSTAWCY USŁUG, OPERATORA LUB PACJENTA W WYNIKU PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, ZAGROŻENIA MECHANICZNEGO BADŹ INNEGO.

ATENÇÃO

(PT)

- ESTE MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SÓ SE ENCONTRA DISPONÍVEL EM INGLÊS.
- SE QUALQUER OUTRO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUE NÃO A GEMS, SOLICITAR ESTES MANUAIS NOUTRO IDIOMA, É DA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE FORNECER OS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO.
- NÃO TENHA TENTADO REPARAR O EQUIPAMENTO SEM TER CONSULTADO E COMPREENDIDO ESTE MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- O NÃO CUMPRIMENTO DESTES AVISOS PODE POR EM PERIGO A SEGURANÇA DO TÉCNICO, OPERADOR OU PACIENTE DEVIDO A CHOQUES ELÉTRICOS, MECÂNICOS OU OUTROS.

ATENȚIE

(RO)

- ACEST MANUAL DE SERVICE ESTE DISPONIBIL NUMAI ÎN LIMBA ENGLEZĂ.
- DACĂ UN FURNIZOR DE SERVICII PENTRU CLIEȚI NECESITĂ O ALTĂ LIMBĂ DECÂT CEA ENGLEZĂ, ESTE DE DATORIA CLIENTULUI SĂ FURNIZEZE O TRADUCERE.
- NU ÎNCERCAȚI SĂ REPARAȚI ECHIPAMENTUL DECÂT ULTERIOR CONSULTĂRII ȘI ÎNȚELEGERII ACESTUI MANUAL DE SERVICE.
- IGNORAREA ACESTUI AVERTISMENT AR PUTEA DUCE LA RĂNIREA DEPANATORULUI, OPERATORULUI SAU PACIENTULUI ÎN URMA PERICOLELOR DE ELECTROCUTARE, MECANICE SAU DE ALTĂ NATURĂ.

ОСТОРОЖНО!

(RU)

- ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
- ЕСЛИ СЕРВИСНОМУ ПЕРСОНАЛУ КЛИЕНТА НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВО НЕ НА АНГЛИЙСКОМ, А НА КАКОМ-ТО ДРУГОМ ЯЗЫКЕ, КЛИЕНТУ СЛЕДУЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕВОД.
- ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕСЬ К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ И ПОЙМИТЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ СВЕДЕНИЯ.
- НЕСООБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ОПЕРАТОР ИЛИ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАТ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, МЕХАНИЧЕСКУЮ ТРАВМУ ИЛИ ДРУГОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ.

UPOZORNENIE

(SK)

- TENTO NÁVOD NA OBSLUHU JE K DISPOZÍCII LEN V ANGLIČTINE.
- AK ZÁKAZNÍKOV POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB VYŽADUJE INÝ JAZYK AKO ANGLIČTINU, POSKYTNUTIE PREKLADATEĽSKÝCH SLUŽIEB JE ZODPOVEDNOSŤOU ZÁKAZNÍKA.
- NEPOKÚŠAJTE SA O OBSLUHU ZARIADENIA SKÔR, AKO SI NEPREČÍTATE NÁVOD NA OBSLUHU A NEPOROZUMIETE MU.
- ZANEDBANIE TOHTO UPOZORNENIA MÔŽE VYÚSTIŤ DO ZRANENIA POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB, OBSLUHUJÚCEJ OSOBY ALEBO PACIENTA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, DO MECHANICKÉHO ALEBO INÉHO NEBEZPEČENSTVA.

ATENCION

(ES)

- ESTE MANUAL DE SERVICIO SOLO EXISTE EN INGLES.
- SI ALGUN PROVEEDOR DE SERVICIOS AJENO A GEMS SOLICITA UN IDIOMA QUE NO SEA EL INGLES, ES RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE OFRECER UN SERVICIO DE TRADUCCION
- NO SE DEBERA DAR SERVICIO TECNICO AL EQUIPO, SIN HABER CONSULTADO Y COMPRENDIDO ESTE MANUAL DE SERVICIO
- LA NO OBSERVANCIA DEL PRESENTE AVISO PUEDE DAR LUGAR A QUE EL PROVEEDOR DE SERVICIOS, EL OPERADOR O EL PACIENTE SUFRAN LESIONES PROVOCADAS POR CAUSAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS O DE OTRA NATURALEZA.

VARNING

(SV)

- DEN HÄR SERVICEHANDBOKEN FINNS BARA TILLGÄNGLIG PÅ ENGELSKA.
- OM EN KUNDS SERVICETEKNIKER HAR BEHOV AV ETT ANNAT SPRÅK ÄN ENGELSKA ANSVARAR KUNDEN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER.
- FÖRSÖK INTE UTFÖRA SERVICE PÅ UTRUSTNINGEN OM DU INTE HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DEN HÄR SERVICEHANDBOKEN.
- OM DU INTE TAR HÄNSYN TILL DEN HÄR VARNINGEN KAN DET RESULTERA I SKADOR PÅ SERVICETEKNIKERN, OPERATÖREN ELLER PATIENTEN TILL FÖLJD AV ELEKTRISKA STÖTAR, MEKANISKA FAROR ELLER ANDRA FAROR.

DİKKAT

(TR)

- BU SERVİS KILAVUZUNUN SADECE İNGİLİZCESİ MEVCUTTUR.
- EĞER MÜŞTERİ TEKNİSYENİ BU KILAVUZU İNGİLİZCE DIŞINDA BİR BAŞKA LİSANDAN TALEP EDERSE, BUNU TERCÜME ETTİRMEK MÜŞTERİYE DÜŞER.
- SERVİS KILAVUZUNU OKUYUP ANLAMADAN EKİPMANLARA MÜDAHALE ETMEYİNİZ.
- BU UYARIYA UYULMAMASI, ELEKTRİK, MEKANİK VEYA DİĞER TEHLİKELERDEN DOLAYI TEKNİSYEN, OPERATÖR VEYA HASTANIN YARALANMASINA YOL AÇABİLİR.

This page left blank intentionally.

SECTION 1 – GETTING STARTED

1-1 INTRODUCTION

This manual provides instructions to install the Mechanical Dock (or 32-Channel Dock) on the MR450 1.5T System.

This Direction covers the following catalog:

M7000EM – Upgrade for Configuration A to B

1-2 REQUIRED TOOLS



FERROUS MATERIAL HAZARD! IF MAGNET IS ENERGIZED, TOOLS AND PARTS REQUIRED FOR THIS INSTALLATION THAT CONTAIN FERROUS MATERIAL AND WILL BE STRONGLY ATTRACTED TO MAGNET AND MAY BECOME DANGEROUS PROJECTILES. KEEP ALL FERROUS TOOLS AT LEAST 10 FEET AWAY FROM THE MAGNET.

<u>ITEM</u>	<u>QTY</u>
Non-ferrous adjustable wrench	1
Non-ferrous flathead screwdriver	1

1-3 DAMAGE IN TRANSPORTATION

All packages should be closely examined at time of delivery. If damage is apparent, have notation “**damage in shipment**” written on **all** copies of the freight or express bill **before** delivery is accepted or “signed for” by a General Electric representative or a hospital receiving agent. Whether noted or concealed, damage **MUST** be reported to the carrier **immediately** upon discovery, or in any event, within **14** days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier. A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this **14** day period.

File a report with

- Call 1-800-548-3366 and use option 8.
- Contact your local service coordinator for more information on this process.

1-4 PRODUCT LOCATOR

The Global Install Base Database (also known as Product Locator System) tracks shipment, trans-shipment, and field location of the serialized models. There are now two methods for submitting Product Locator information.

1. At this time, for **U.S. ONLY**, the preferred method of submitting information is the *FE Site Verification Web Site* at:
<http://gein2.med.ge.com/gib>

The FE Site Verification consists of three components that are available on the web from the main menu. They are:

- Install/deinstall product locator model and serial numbers
- Add/modify ship to address information
- Update CARES FE data for primary/secondary FEs

To obtain a copy of the FE training tutorial for using this website, a downloadable copy is available at the following:
Product Locator Support Central Page – <http://supportcentral.ge.com/15563>

2. One “Shipping Card” is filled out and submitted when shipped (extra cards are supplied for trans-shipments between storage and distribution points), and the “Installation Card” and extra shipment cards are attached.

Verify that serial and model number on each rating plate matches installation card numbers before removing installation card. Note that there may be one or more shipment cards and bar code labels with the installation card. These shipment cards are used to trace the transfer of serialized units between various inventory storage and distribution points until the product reaches its final installation destination. Process just the installation card and discard any extra shipment cards and labels.

SECTION 2 – INSTALLATION PROCEDURE

2-1 SAFETY



⚠ DANGER

FATAL ELECTRIC SHOCK HAZARD!!

TO PREVENT FATAL ELECTRIC SHOCK, DISCONNECT POWER FROM THE PDU BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING PROCEDURES.

PERFORM LOCKOUT / TAGOUT PROCEDURE PER GE OSHA LOCKOUT / TAGOUT REQUIREMENTS LISTED IN THE FIELD SERVICE EHS MANUAL & TRAINING 2000 P/N 2135387-200.



⚠ WARNING

POSSIBLE PERSONAL INJURY!

THIS PROCEDURE REQUIRES REMOVAL OF FERROUS MATERIAL IN CLOSE PROXIMITY TO THE MAGNET.



THEREFORE, TWO FIELD ENGINEERS ARE REQUIRED AT ALL TIMES.

2-2 DOCK REMOVAL

1. Perform Lock Out Tag Out.
2. Undock the patient table and remove it from the scan room.


2-2-1 DISCONNECT CABLES

1. Disconnect the three cables routed from the Dock that are connected to the bracket on the Left front leg.
2. If required, unfasten the magnet enclosure cover from the bracket to aid in sliding out the cables.

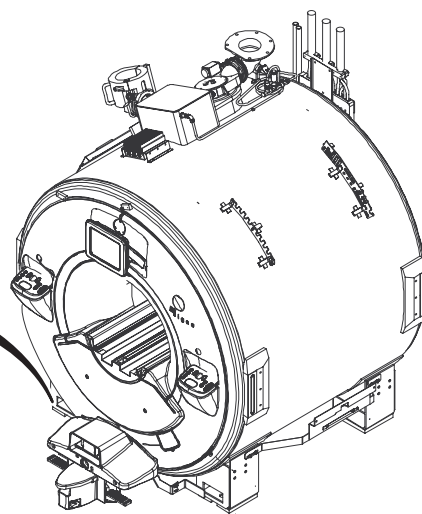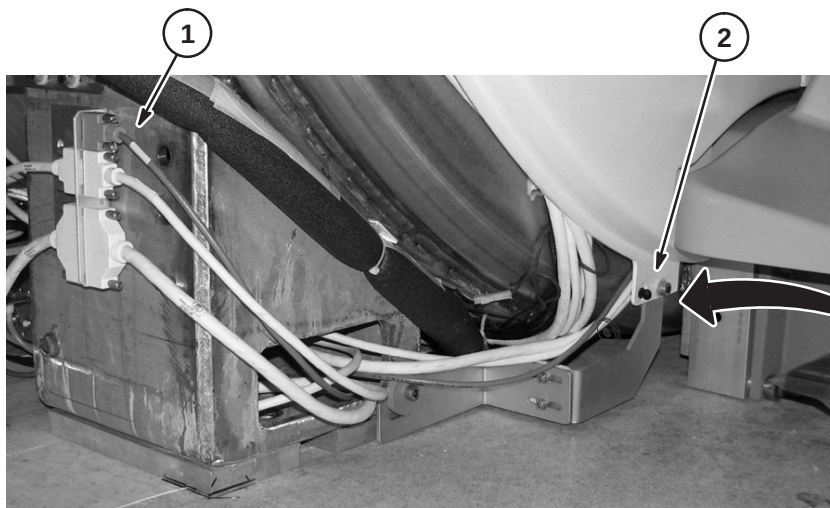


2-2-2 UNFASTEN AND REMOVE DOCK

1. Scribe a line around the base of the dock on the floor to ensure the replacement dock will be located in the same position.

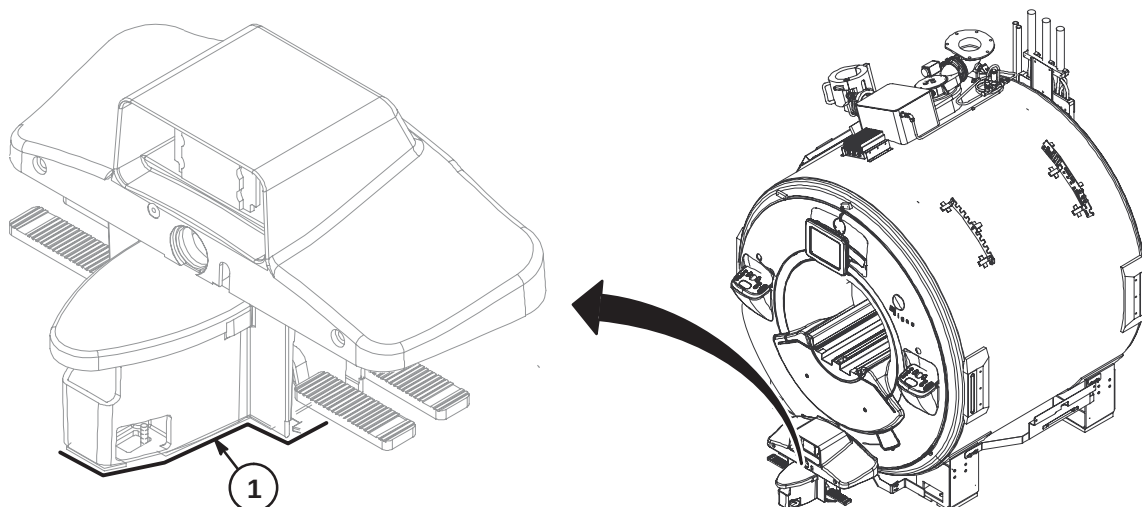

2. Loosen the nuts attaching the dock assembly at the front and at the right and left brackets.
3. Make sure the same quantity of washers remain on mounting studs between Dock and mounting brackets when Dock is re-attached.

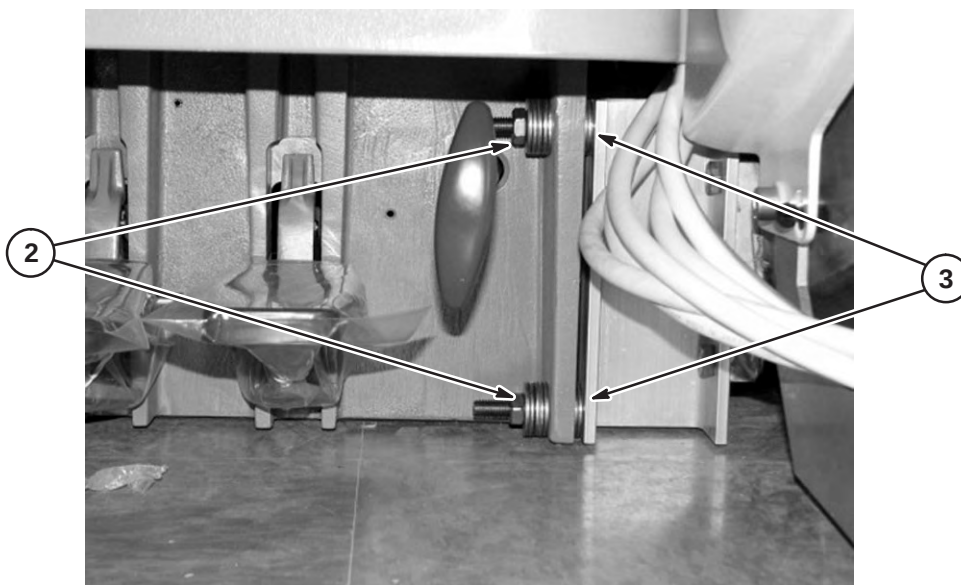


WARNING

POSSIBLE PERSONAL INJURY!
THE DOCK CONTAINS FERROUS MATERIALS.
FROM THIS POINT OF THE PROCEDURE FORWARD, DOWNWARD PRESSURE MUST BE CONTINUOUSLY APPLIED TO THE DOCK SO AS TO PREVENT IT FROM BEING PULLED INTO THE MAGNET BORE.

2-2-2 UNFASTEN AND REMOVE DOCK (Continued)

4. Applying pressure to the top of the dock, completely remove all dock attachment nuts and washers.
5. Use two FEs to pull the dock away from the magnet until the stud in the front is hitting the inner frame.


NOTE: Do not remove washers that are located behind the Dock, as they are needed to proper Dock alignment.

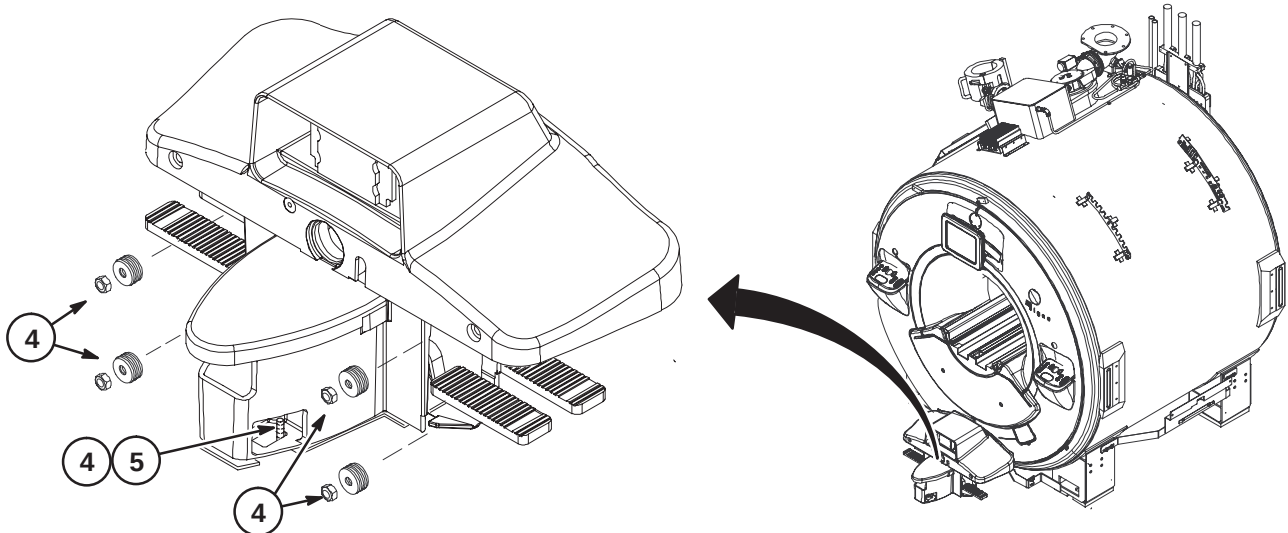**⚠ WARNING****POSSIBLE PERSONAL INJURY!**

TO OPPOSE ANY PULL FROM THE MAGNET, FIELD ENGINEERS MUST APPLY CONTINUOUS DOWNWARD PRESSURE TO THE TOP OF THE DOCK EVEN WHEN LIFTING THE DOCK IN THIS STEP.

DO NOT PLACE ANY PART OF THE HUMAN BODY IN THE PATH BETWEEN THE DOCK AND THE MAGNET.

6. Use two FEs to lift the dock up JUST ENOUGH to clear the top of the stud in the floor.

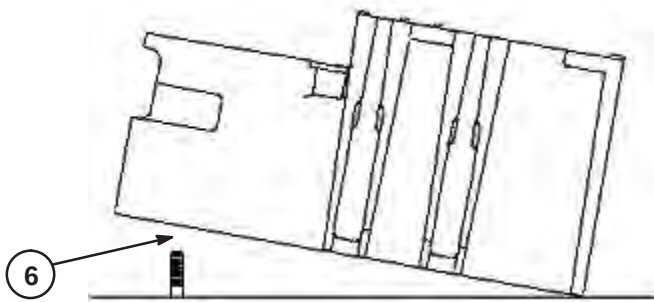


NOTE: It should not be extremely difficult for two FEs to pull the dock away from the magnet once all fastening hardware is removed. If you do encounter difficulty, check that the cables are not caught against the front of the magnet.

7. With two field engineers, one holding each side of the dock, slide the dock away from the magnet front to where the foot of the patient table would normally be located.
8. When a safe distance away from the magnetic field (at least as far as the foot end of the patient table), two field engineers may slowly lift the dock from the floor and exit the room.


2-3 INSTALLATION OF NEW 32-CHANNEL DOCK

2-3-1 INSTALL DOCK


1. With two field engineers, one holding each side of the dock, enter the magnet room and place the dock on the floor where the foot of the patient table would normally be located.
2. Position Rubber Pad under Dock.
3. With two field engineers, one applying vertical downward pressure to each side of the dock, slide the dock toward the magnet front.
4. Make sure cables are routed to each side of mounting brackets while sliding Dock into position.

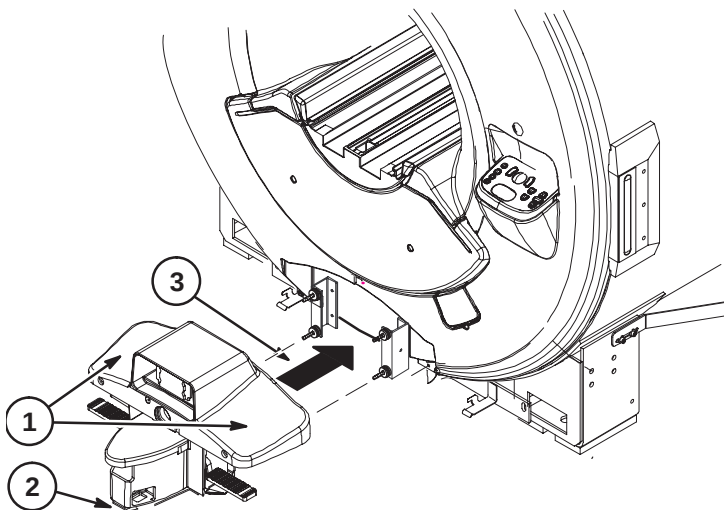

5. While maintaining pressure to the top of the dock, position the dock against the base of the magnet to the left of the floor stud at the front of the dock.

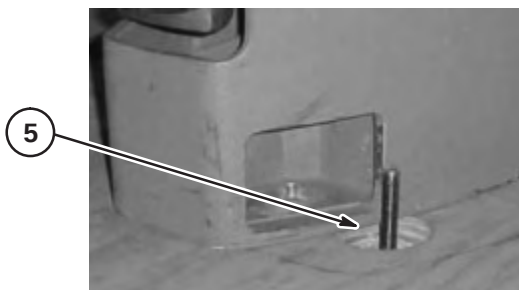


6. Lift the dock just enough to clear the top of the stud in the floor.
7. While rotating the dock to the right, align the hole at the base of the dock with the stud and place the dock down into position.

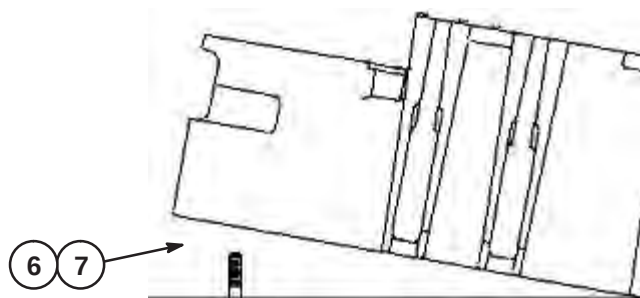


2-3-1 INSTALL DOCK (Continued)

8. Position replacement Dock on scribed line.
9. Fasten Dock Asm to floor mounted stud with previously removed Dock Clamp Plate, 10.5mm ID Washer , and 10mm Hex Nut. Apply Loctite 242 as required.

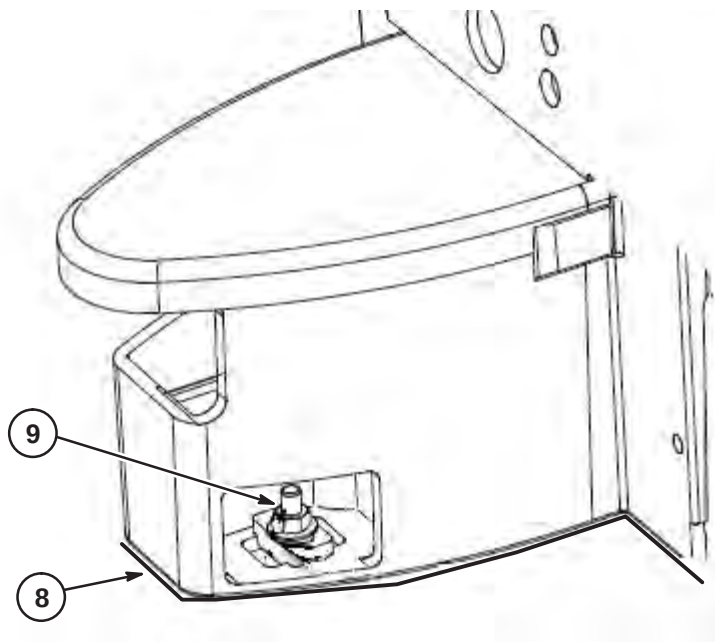

10. Secure Dock to mounting studs using previously removed nuts and washers.

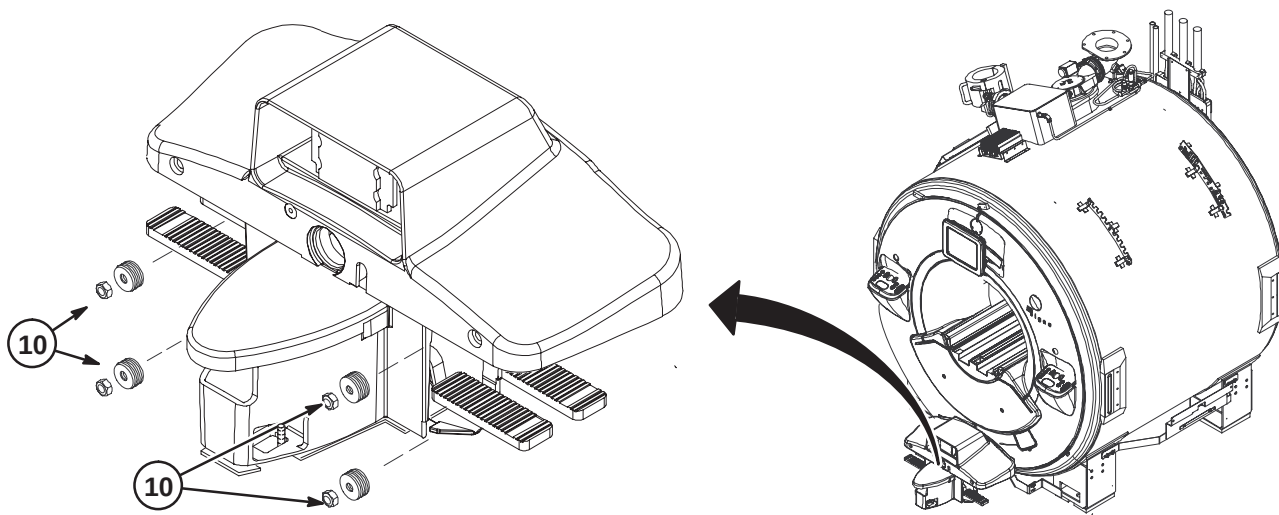


2-3-2 DOCK CABLES – LEFT SIDE

1. Route and connect cables from dock as shown.
2. Insert and loop excess cable thru hole at front of magnet leg.
3. Loosen bottom of cover and slide cables behind cover. This is required to install front Trim Covers.


**2-3-3 DOCK CABLES – RIGHT SIDE**

1. Route cables from dock as shown. Cables can be routed using any of the following three ways:
 - Thru the hole in the magnet (shown below)
 - Between the leg and the magnet
2. Loosen bottom of cover and slide cables behind cover. This is required to install front Trim Covers.


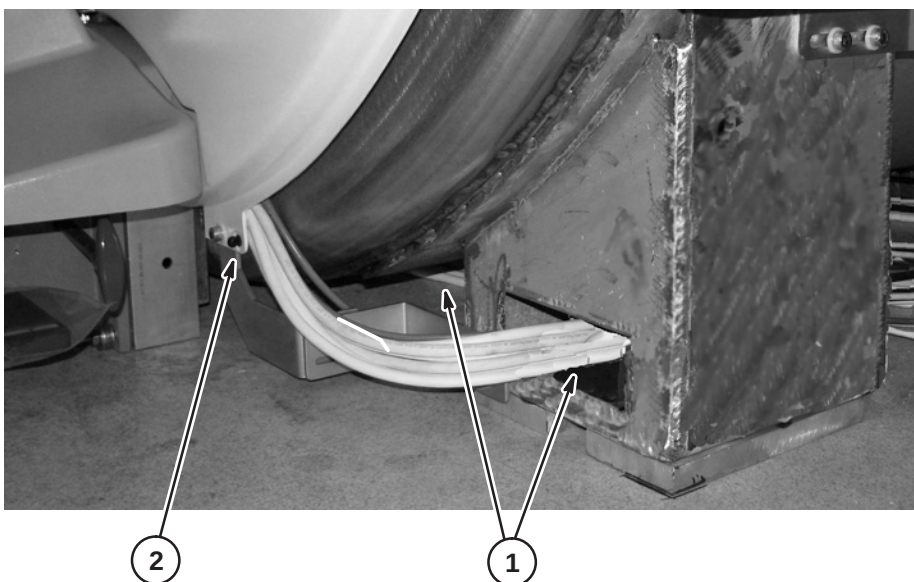


2-3-3 DOCK CABLES – RIGHT SIDE (Continued)

3. Route cables under magnet to Rear Pedestal. Dress and neatly store excess cable under magnet.

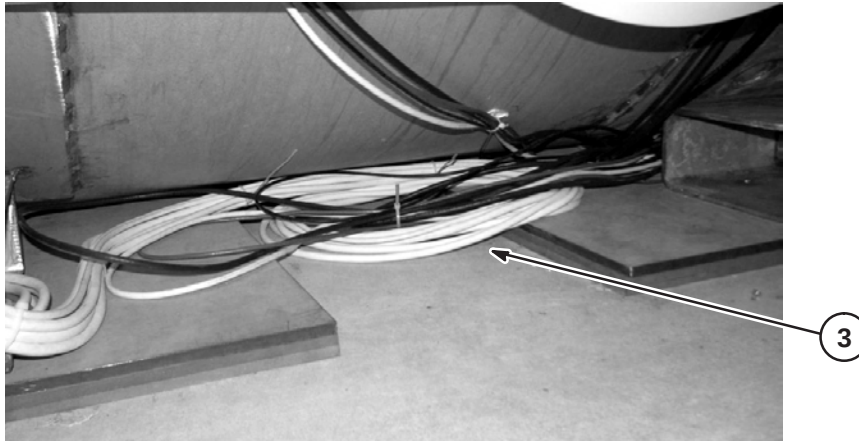

4. To right side of Rear Pedestal – route and connect Runs M1330, M1331, M1332, and M1333 to PED-RBOX as marked.
5. To left side of Rear Pedestal – route and connect Runs M1371 and M1372 to SLOT 11, J3 & J4 as marked.
6. To left side of Rear Pedestal – route and connect Run M3373 to J9 on PED-RBOX as marked.

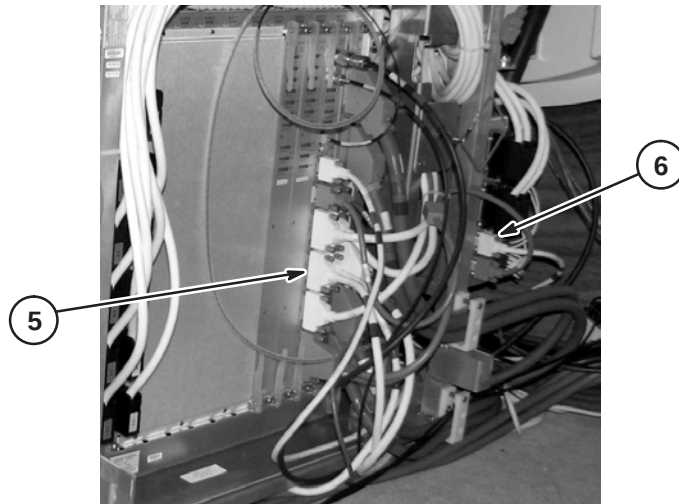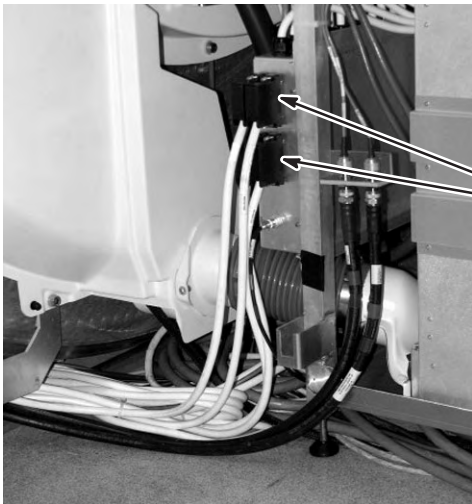

2-4 ALTERNATE CABLE INSTALLATION

If required, an alternate set of cables (5192500) is provided for routing and connecting from the cable bracket on the side of the right front magnet leg to the Rear Pedestal.

2-5 POWER UP

1. Remove the power lock-out tag-out and restore power.
2. Align and dock the table.

Note: If adjustment is required for alignment of patient table, refer to calibration and setup procedures on Service Methods DVD until proper gap is achieved.

SECTION 3 – COMPLETION CHECKLIST

3-1 MECHANICAL INSTALLATION COMPLETION

The following steps need to be reviewed and completed by GE Field Engineer, especially if the system was installed by non-GE personel. Check off boxes at the front of each item below when complete.

- ☐ Check procedure to make sure all steps are complete
- ☐ Resolve shipment shortages
- ☐ Make sure all rating plates are installed
- ☐ Recheck all wiring connections using cable map
- ☐ Correct for wiring errors if necessary

3-2 GE FIELD ENGINEER RESPONSIBILITIES

1. Record and enter applicable data into applicable site configuration files and records.
2. Complete Product Locator information for all installed serialized components, new or updated, via either:
 - **(U.S. Only)** *FE Site Verification Web Site*
or
 - Process and return product locator installation cards for all serialized components to:
Product Locator File, P.O. Box 414, W-523, Milwaukee, WI 53201-0414

Refer to Section 1-4 for details on submitting Product Locator information.

Note

Failure to fill out and return Product Locator Cards may result in failure of your site to receive future FMI's.

3. Store the delivered site's set of service tools and spares kit in service cabinet at site.
4. Leave the site's set of Manuals and CD-ROM at site. Install Service and Operator documentation on the host computer. Organize and set up reference cabinet for the Manuals.
5. Locate any Material Safety Data Sheets (MSDS).. They must be retained on site. Customer is to be informed that material with MSDS was brought into site and customer should know/decide where MSDS should be retained at site.