



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

TECHNICAL BULLETIN

Technical Bulletin Unique Identifier	DOC2876113
Title	MR29_R04 iserv for Remote Software Download
Subject	The RSD (Remote software download) will be utilized by some sites to upgrade to MR29.1_R04 software, which was released to introduce software enhancements and fix existing MR29 software errors.
Applicability (e.g., affected product, process)	For Product used 1.5T list as below: • SIGNA™ Artist configurations • SIGNA™ Voyager configurations • SIGNA™ Creator / Explorer configurations • Optima™ MR450W 1.5T configurations (includes 450W GEM and 450W Non-GEM configs) • 1.5T SIGNA™ HDxt (16 channel) configurations For Product used 3.0T list as below: • SIGNA™ Architect configurations • SIGNA™ Pioneer configurations • SIGNA™ Premier configurations • Discovery MR750/750w configurations
Date	30-June-2023
Relevant Product Business (select one)	☒ Imaging ☐ Patient Care Solutions ☐ Ultrasound ☐ Other: _____
Originating Modality	MR
Details	This iserv for RSD provides instructions for fields that will upgrade to the MR29.1_R04 software by RSD for above MR systems.
Tracking Number	N/A
Affected Service Publications	The RSD instructions and procedure is already in the service documentations of the products listed above, this document intends to deliver the RSD instructions to the field service team in a more dedicated way. There is no impact on any service documents.
Resolution	N/A
Technical Bulletin POC	Hou Jiannan (SSO:223053253)



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

Classification

This RSD guidance is classified as Class A and shall not be disclosed to anyone outside the authorized personnel.

GEHC Global Language Policy

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (BG)	Това упътване за работа е налично само на английски език. - Ако доставчикът на услугата на клиента изиска друг език, задължение на клиента е да осигури превод. - Не използвайте оборудването, преди да сте се консултирали и разбрали упътването за работа. - Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на доставчика на услугата, оператора или пациента в резултат на токов удар, механична или друга опасност.
警告 (ZH-CN)	本维修手册仅提供英文版本。 - 如果客户的维修服务人员需要非英文版本，则客户需自行提供翻译服务。 - 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。 - 忽略本警告可能对维修服务人员、操作人员或患者造成电击、机械伤害或其他形式的伤害。
警告 (ZH-HK)	本服務手冊僅提供英文版本。 - 倘若客戶的服務供應商需要英文以外之服務手冊，客戶有責任提供翻譯服務。 - 除非已參閱本服務手冊及明白其內容，否則切勿嘗試維修設備。 - 不遵從本警告或會令服務供應商、網絡供應商或病人受到觸電、機械性或其他危險。
警告 (ZH-TW)	本維修手冊僅有英文版。 - 若客戶的維修廠商需要英文版以外的語言，應由客戶自行提供翻譯服務。 - 請勿試圖維修本設備，除非您已查閱並瞭解本維修手冊。 - 若未留意本警告，可能導致維修廠商、操作員或病患因觸電、機械或其他危險而受傷。
UPOZORENJE (HR)	Ovaj servisni priručnik dostupan je na engleskom jeziku. - Ako davatelj usluge klijenta treba neki drugi jezik, klijent je dužan osigurati prijevod. - Ne pokušavajte servisirati opremu ako niste u potpunosti pročitali i razumjeli ovaj servisni priručnik.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

	Zanemarite li ovo upozorenje, može doći do ozljede davatelja usluge, operatera ili pacijenta uslijed strujnog udara, mehaničkih ili drugih rizika.
VÝSTRAHA (CS)	Tento provozní návod existuje pouze v anglickém jazyce. - V případě, že externí služba zákazníkům potřebuje návod v jiném jazyce, je zajištění překladu do odpovídajícího jazyka úkolem zákazníka. - Nesnažte se o údržbu tohoto zařízení, aniž byste si přečetli tento provozní návod a pochopili jeho obsah. - V případě nedodržování této výstrahy může dojít k poranění pracovníka prodejního servisu, obslužného personálu nebo pacientů vlivem elektrického proudu, respektive vlivem mechanických či jiných rizik.
ADVARSEL (DA)	Denne servicemanual findes kun på engelsk. - Hvis en kundes tekniker har brug for et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelse. - Forsøg ikke at servicere udstyret uden at læse og forstå denne servicemanual. - Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på grund af elektrisk stød, mekanisk eller anden fare for teknikeren, operatøren eller patienten.
WAARSCHUWING (NL)	Deze onderhoudshandleiding is enkel in het Engels verkrijgbaar. - Als het onderhoudspersoneel een andere taal vereist, dan is de klant verantwoordelijk voor de vertaling ervan. - Probeer de apparatuur niet te onderhouden alvorens deze onderhoudshandleiding werd geraadpleegd en begrepen is. - Indien deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, zou het onderhoudspersoneel, de operator of een patiënt gewond kunnen raken als gevolg van een elektrische schok, mechanische of andere gevaren.
WARNING (EN)	This service manual is available in English only. - If a customer's service provider requires a language other than English, it is the customer's responsibility to provide translation services. - Do not attempt to service the equipment unless this service manual has been consulted and is understood. - Failure to heed this warning may result in injury to the service provider, operator or patient from electric shock, mechanical or other hazards.
HOIATUS (ET)	See teenindusjuhend on saadaval ainult inglise keeles. - Kui klienditeeninduse osutaja nõuab juhendit inglise keelest erinevas keeles, vastutab klient tõlketeenuse osutamise eest. - Ärge üritage seadmeid teenindada enne eelnevalt käesoleva teenindusjuhendiga tutvumist ja sellest aru saamist.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

	Käesoleva hoiatuse eiramine võib põhjustada teenuseosutaja, operaatori või patsiendi vigastamist elektrilöögi, mehaanilise või muu ohu tagajärjel.
VAROITUS (FI)	Tämä huolto-ohje on saatavilla vain englanniksi. - Jos asiakkaan huoltohenkilöstö vaatii muuta kuin englanninkielistä materiaalia, tarvittavan käännöksen hankkiminen on asiakkaan vastuulla. - Älä yritä korjata laitteistoa ennen kuin olet varmasti lukenut ja ymmärtänyt tämän huolto-ohjeen. - Mikäli tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla huoltohenkilöstön, laitteiston käyttäjän tai potilaan vahingoittuminen sähköiskun, mekaanisen vian tai muun vaaratilanteen vuoksi.
ATTENTION (FR)	Ce manuel d'installation et de maintenance est disponible uniquement en anglais. - Si le technicien d'un client a besoin de ce manuel dans une langue autre que l'anglais, il incombe au client de le faire traduire. - Ne pas tenter d'intervenir sur les équipements tant que ce manuel d'installation et de maintenance n'a pas été consulté et compris. - Le non-respect de cet avertissement peut entraîner chez le technicien, l'opérateur ou le patient des blessures dues à des dangers électriques, mécaniques ou autres.
WARNUNG (DE)	Diese Serviceanleitung existiert nur in englischer Sprache. - Falls ein fremder Kundendienst eine andere Sprache benötigt, ist es Aufgabe des Kunden für eine entsprechende Übersetzung zu sorgen. - Versuchen Sie nicht diese Anlage zu warten, ohne diese Serviceanleitung gelesen und verstanden zu haben. - Wird diese Warnung nicht beachtet, so kann es zu Verletzungen des Kundendiensttechnikers, des Bedieners oder des Patienten durch Stromschläge, mechanische oder sonstige Gefahren kommen.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)	Το παρόν εγχειρίδιο σέρβις διατίθεται στα αγγλικά μόνο. Εάν το άτομο παροχής σέρβις ενός πελάτη απαιτεί το παρόν εγχειρίδιο σε γλώσσα εκτός των αγγλικών, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης. Μην επιχειρήσετε την εκτέλεση εργασιών σέρβις στον εξοπλισμό εκτός εάν έχετε συμβουλευτεί και έχετε κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο σέρβις. Εάν δεν λάβετε υπόψη την προειδοποίηση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στο άτομο παροχής σέρβις, στο χειριστή ή στον ασθενή από ηλεκτροπληξία, μηχανικούς ή άλλους κινδύνους.
FIGYELMEZTETÉS (HU)	Ezen karbantartási kézikönyv kizárólag angol nyelven érhető el. - Ha a vevő szolgáltatója angoltól eltérő nyelvre tart igényt, akkor a vevő felelőssége a fordítás elkészítése. - Ne próbálja elkezdni használni a berendezést, amíg a karbantartási kézikönyvben leírtakat nem értelmezték.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

	Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a szolgáltató, működtető vagy a beteg áramütés, mechanikai vagy egyéb veszélyhelyzet miatti sérülését eredményezheti.
AÐVÖRUN (IS)	Þessi þjónustuhandbók er aðeins fánleg á ensku. - Ef að þjónustuveitandi viðskiptamanns þarfnast annas tungumáls en ensku, er það skylda viðskiptamanns að skaffa tungumálþjónustu. - Reynið ekki að afgreiða tækið nema að þessi þjónustuhandbók hefur verið skoðuð og skilin. - Brot á sinna þessari aðvörun getur leitt til meiðsla á þjónustuveitanda, stjórnanda eða sjúklings frá raflosti, vélrænu eða öðrum áhættum.
AVVERTENZA (IT)	Il presente manuale di manutenzione è disponibile soltanto in lingua inglese. - Se un addetto alla manutenzione richiede il manuale in una lingua diversa, il cliente è tenuto a provvedere direttamente alla traduzione. - Procedere alla manutenzione dell'apparecchiatura solo dopo aver consultato il presente manuale ed averne compreso il contenuto. - Il mancato rispetto della presente avvertenza potrebbe causare lesioni all'addetto alla manutenzione, all'operatore o ai pazienti provocate da scosse elettriche, urti meccanici o altri rischi.
警告 (JA)	このサービスマニュアルには英語版しかありません。 - サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。 - このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。 - この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。
경고 (KO)	본 서비스 매뉴얼은 영어로만 이용하실 수 있습니다. - 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우, 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다. - 본 서비스 매뉴얼을 참조하여 숙지하지 않은 이상 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오. - 본 경고 사항에 유의하지 않으면 전기 쇼크, 기계적 위험, 또는 기타 위험으로 인해 서비스 제공자, 사용자 또는 환자에게 부상을 입힐 수 있습니다.
BRĪDINĀJUMS (LV)	Šī apkopes rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā. - Ja klienta apkopes sniedzējam nepieciešama informācija citā valodā, klienta pienākums ir nodrošināt tulkojumu. - Neveiciet aprikojuma apkopi bez apkopes rokasgrāmatas izlasīšanas un saprašanas. - Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties elektriskās strāvas trieciena, mehānisku vai citu faktoru izraisītu traumų risks apkopes sniedzējam, operatoram vai pacientam.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

ĮSPĖJIMAS (LT)	Šis eksploataavimo vadovas yra tik anglų kalba. • Jei kliento paslaugų tiekėjas reikalauja vadovo kita kalba – ne anglų, suteikti vertimo paslaugas privalo klientas. • Nemėginkite atlikti įrangos techninės priežiūros, jei neperskaitėte ar nesupratote šio eksploataavimo vadovo. • Jei nepaisysite šio įspėjimo, galimi paslaugų tiekėjo, operatoriaus ar paciento sužalojimai dėl elektros šoko, mechaninių ar kitų pavojų.
ADVARSEL (NO)	Denne servicehåndboken finnes bare på engelsk. • Hvis kundens serviceleverandør har bruk for et annet språk, er det kundens ansvar å sørge for oversettelse. • Ikke forsøk å reparere utstyret uten at denne servicehåndboken er lest og forstått. • Manglende hensyn til denne advarselen kan føre til at serviceleverandøren, operatøren eller pasienten skades på grunn av elektrisk støt, mekaniske eller andre farer.
OSTRZEŻENIE (PL)	Niniejszy podręcznik serwisowy dostępny jest jedynie w języku angielskim. • Jeśli serwisant klienta wymaga języka innego niż angielski, zapewnienie usługi tłumaczenia jest obowiązkiem klienta. • Nie próbować serwisować urządzenia bez zapoznania się z niniejszym podręcznikiem serwisowym i zrozumienia go. • Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może doprowadzić do obrażeń serwisanta, operatora lub pacjenta w wyniku porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia mechanicznego bądź innego.
ATENÇÃO (PT-BR)	Este manual de assistência técnica encontra-se disponível unicamente em inglês. • Se outro serviço de assistência técnica solicitar a tradução deste manual, caberá ao cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • A não observância deste aviso pode ocasionar ferimentos no técnico, operador ou paciente decorrentes de choques elétricos, mecânicos ou outros.
ATENÇÃO (PT-PT)	Este manual de assistência técnica só se encontra disponível em inglês. • Se qualquer outro serviço de assistência técnica solicitar este manual noutra linguagem, é da responsabilidade do cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • O não cumprimento deste aviso pode colocar em perigo a segurança do técnico, do operador ou do paciente devido a choques eléctricos, mecânicos ou outros.
ATENȚIE (RO)	Acest manual de service este disponibil doar în limba engleză.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

	• Dacă un furnizor de servicii pentru clienți necesită o altă limbă decât cea engleză, este de datoria clientului să furnizeze o traducere. • Nu încercați să reparați echipamentul decât ulterior consultării și înțelegerii acestui manual de service. • Ignorarea acestui avertisment ar putea duce la rănirea depanatorului, operatorului sau pacientului în urma pericolelor de electrocutare, mecanice sau de altă natură.
ОСТОРОЖНО! (RU)	Данное руководство по техническому обслуживанию представлено только на английском языке. • Если сервисному персоналу клиента необходимо руководство не на английском, а на каком-то другом языке, клиенту следует самостоятельно обеспечить перевод. • Перед техническим обслуживанием оборудования обязательно обратитесь к данному руководству и поймите изложенные в нем сведения. • Несоблюдение требований данного предупреждения может привести к тому, что специалист по техобслуживанию, оператор или пациент получит удар электрическим током, механическую травму или другое повреждение.
UPOZORENJE (SR)	Ovo servisno uputstvo je dostupno samo na engleskom jeziku. • Ako klijentov serviser zahteva neki drugi jezik, klijent je dužan da obezbedi prevodilačke usluge. • Ne pokušavajte da opravite uređaj ako niste pročitali i razumeli ovo servisno uputstvo. • Zanemarivanje ovog upozorenja može dovesti do povređivanja serviser, rukovaoca ili pacijenta usled strujnog udara ili mehaničkih i drugih opasnosti.
UPOZORNENIE (SK)	Tento návod na obsluhu je k dispozícii len v angličtine. • Ak zákazníkovi poskytovateľ služieb vyžaduje iný jazyk ako angličtinu, poskytnutie prekladateľských služieb je zodpovednosťou zákazníka. • Nepokúšajte sa o obsluhu zariadenia, kým si neprečítate návod na obsluhu a neporozumiete mu. • Zanedbanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie poskytovateľa služieb, obsluhujúcej osoby alebo pacienta elektrickým prúdom, mechanické alebo iné ohrozenie.
ATENCIÓN (ES)	Este manual de servicio sólo existe en inglés. • Si el encargado de mantenimiento de un cliente necesita un idioma que no sea el inglés, el cliente deberá encargarse de la traducción del manual. • No se deberá dar servicio técnico al equipo, sin haber consultado y comprendido este manual de servicio. • La no observancia del presente aviso puede dar lugar a que el proveedor de servicios, el operador o el paciente sufran lesiones provocadas por causas eléctricas, mecánicas o de otra naturaleza.
VARNING (SV)	Den här servicehandboken finns bara tillgänglig på engelska.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

	• Om en kunds servicetekniker har behov av ett annat språk än engelska, ansvarar kunden för att tillhandahålla översättningstjänster. • Försök inte utföra service på utrustningen om du inte har läst och förstår den här servicehandboken. • Om du inte tar hänsyn till den här varningen kan det resultera i skador på serviceteknikern, operatören eller patienten till följd av elektriska stötar, mekaniska faror eller andra faror.
OPOZORILO (SL)	Ta servisni priročnik je na voljo samo v angleškem jeziku. • Če ponudnik storitve stranke potrebuje priročnik v drugem jeziku, mora stranka zagotoviti prevod. • Ne poskušajte servisirati opreme, če tega priročnika niste v celoti prebrali in razumeli. • Če tega opozorila ne upoštevate, se lahko zaradi električnega udara, mehanskih ali drugih nevarnosti poškoduje ponudnik storitev, operater ali bolnik.
DİKKAT (TR)	Bu servis kılavuzunun sadece ingilizcesi mevcuttur. • Eğer müşteri teknisyeni bu kılavuzu ingilizce dışında bir başka lisandan talep ederse, bunu tercüme ettirmek müşteriye düşer. • Servis kılavuzunu okuyup anlamadan ekipmanlara müdahale etmeyiniz. • Bu uyarıya uyulmaması, elektrik, mekanik veya diğer tehlikelerden dolayı teknisyen, operatör veya hastanın yaralanmasına yol açabilir.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (UK)	Даний посібник з експлуатації доступний тільки англійською мовою. • Якщо постачальник послуг клієнта спілкується іноземною мовою, тоді клієнт зобов'язаний забезпечити переклад. • Заборонено проводити огляд обладнання без попереднього звертання до даного посібника з експлуатації і розуміння інформації, поданої у ньому. • Недотримання цього застереження може завдати шкоди здоров'ю постачальника послуг, оператора або пацієнта через ураження електричним струмом, механічну травму або інше ушкодження.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

Special instruction

- For sites where ordered Option key Air Recon DL M7009SA, contact OLE for support new option key installation.
- For RSD, it's mandatory to use SAMSUNG MUF-64BA / MUF-64BE3 / MUF-64BE4, which is the empty USB (PN:5861614) with "Backup Media for MR Software" on its label card. Do not use any other USB media to perform the software downloads.
- Time requirement for RSD: **3.5 Hours by 1 FE** (after the SW download is completed already on Customer's GOC)



MUF-64BA



MUF-64BE3



MUF-64BE4

Procedures

[Remote full software download procedure](#)

[Installing operator documentation through DVD media](#)

Remote full software download procedure

Use these steps to install a full software once you are logged onto the system.

Pre-requisite

- Only users that have the **GESoftwareInstaller Group** status can install the full software.
- Reference the Privacy and Security for MR systems for Role-based membership considerations. The url link to the Privacy and Security for MR systems operator manual is:

<https://www.gehealthcare.com/security>


Several tasks need to be completed before performing a full software update and these full software updates can occur several times a year.

- Locate your MR GE Software upgrade USB media, it is sent with your software collector. Typically, the administration, IT person or the Radiology department manager has the MR GE Software upgrade USB media.
 - **Do not use any other USB media to save the software downloads.**
- Back up all images! A full software update will erase ALL images, be sure to film and archive all images before starting this update.
- Schedule your full software downloads to occur at the end of your clinical imaging day. The system must be idle and powered on.
-  It is very important to remove any save info (DVD) from the drive. If you don't remove the DVD the install will be corrupted.
-  Post a note on scanner to not touch or reboot scanner while its installing the software.

Procedure

1. From the footer area of the screen, note the **Remote Software icon** .
- This icon displays when a new software update(s) is available to install and the MR system is up and operational.


Figure 3-192: Software download available icon

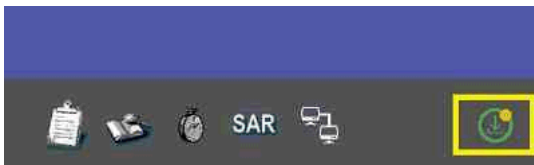


2. Once a software download Icon is present and the system is ready for the full software install, the person performing the software install must have the role as a GE software installer. Follow these steps to check if the current user is already having the GE software installer role, or add the required installer role if not:
 - a. From the header area of the screen, click the Tools icon.
 - b. From the System Management work area, click the Service Desktop Manager tab.
 - c. From the Service Desktop Manager, click **User Accounts**.

MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

Figure 3-193: Top area of Service Desktop Manager

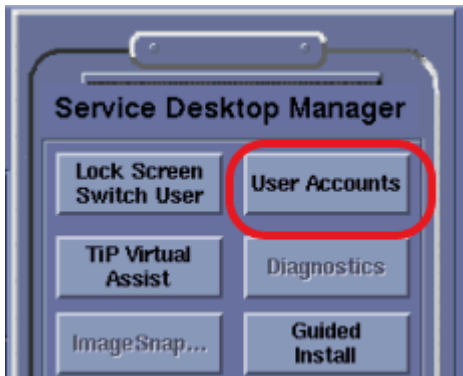


- d. Use the EA3 user account/password to log in the user account window

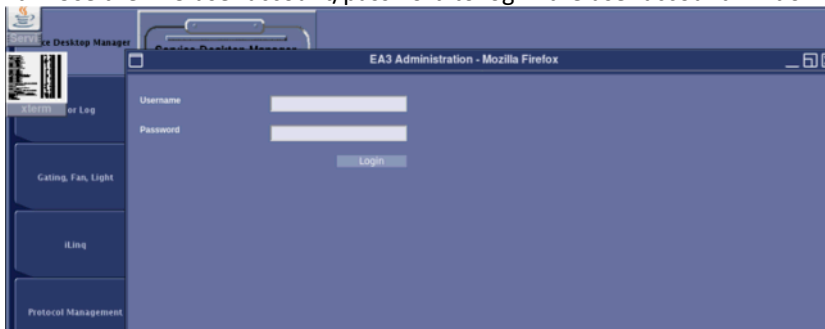



- e. Check if the current user is having the “GESoftwareInstallerGroup” role, if not, click “add to Groups” to manually add the privilege for the EA3 user account as shown in below pictures.

Alternatively, you can check if other local users(except root user) have the “GESoftwareInstallerGroup”, if they do and you have the password, you can switch to that user account by clicking “Lock Screen Switch User” on Figure 3-193, and then jump to step 3 on the next page.

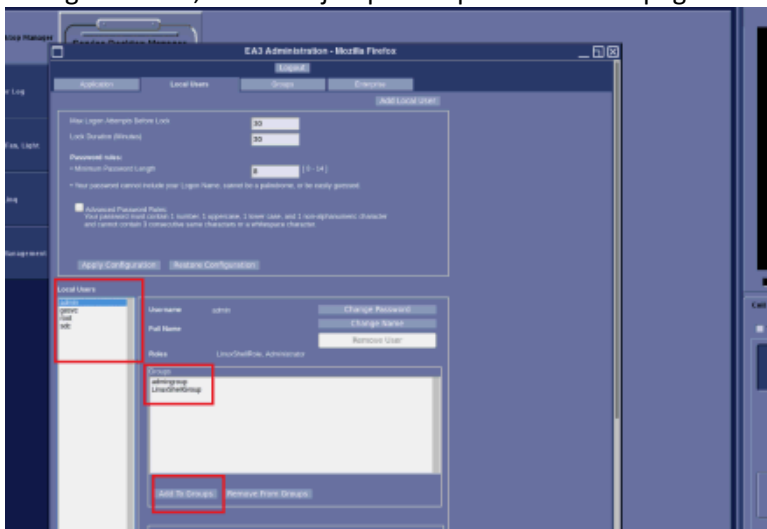




MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

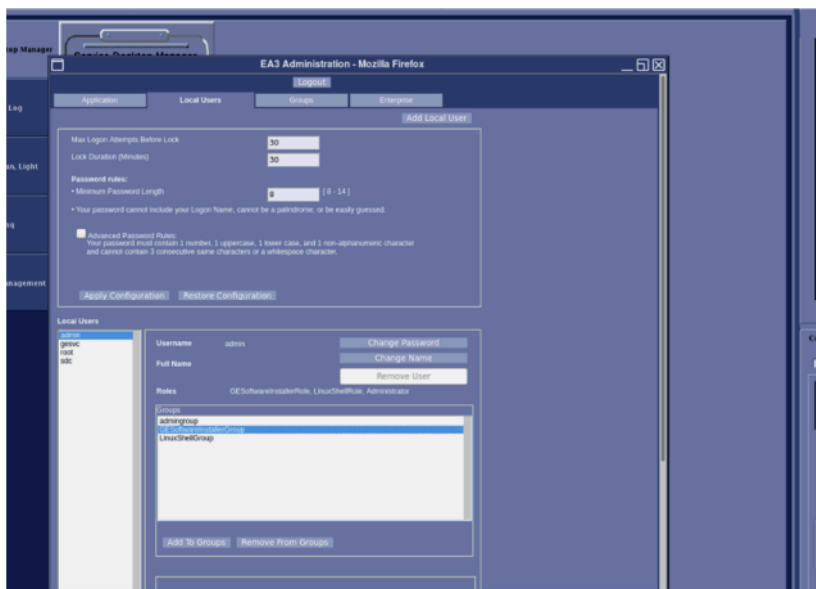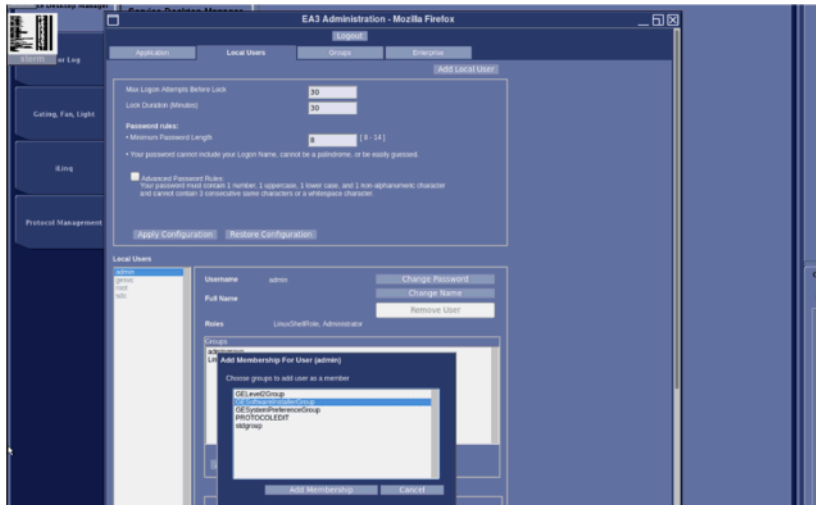


- f. After adding the GESoftwareInstaller privilege, please reboot and log in using the same EA3 account.
3. From the front of the computer, insert the MR GE Software upgrade USB media into either of the USB ports.
- Do not use the MR GE Software upgrade USB media for other save procedures.
4. From the footer area of the screen, click the **Remote Software icon** .
5. From the Service updates screen, complete the following.

MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

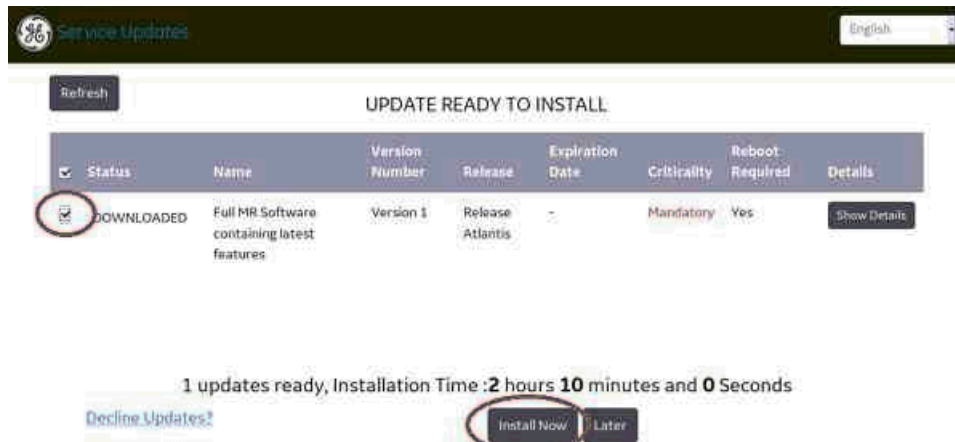Figure 3-194: Service updates screen


- a. Click the Full MR Software containing latest features check box.
 - b. Note the installation time and make sure that the scanner is free for the full installation time.
 - c. Click **Install Now**.
6. When the system has detected the correct USB media is installed the following screen displays.

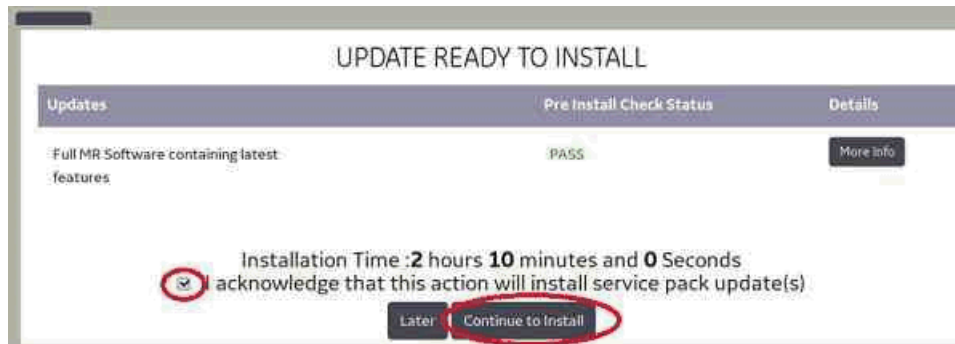Figure 3-195: Software ready to install screen

- a. Click acknowledgment check box.
 - b. Click **Continue to Install**.
7. From the Secondary confirmation prompt, complete these steps.

Figure 3-196: Confirmation prompt

MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

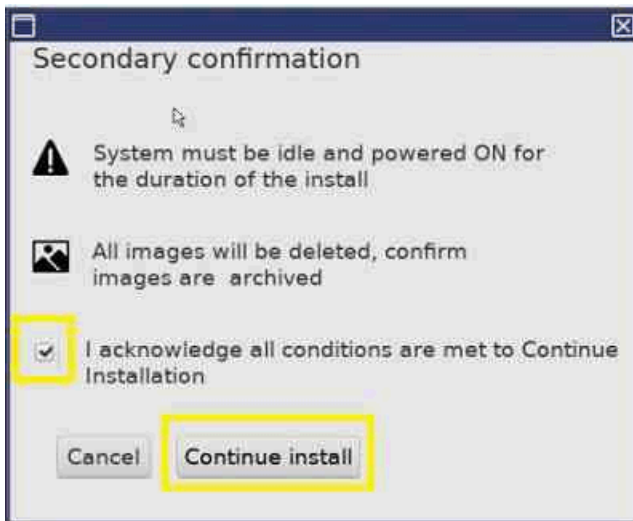

- a. Click the acknowledge check box.
 - b. Click **Continue install**.
 - To click **Cancel** at this point is not recommended. It will close the Update Ready to Install screen.
8. View the following screens as the installation progresses.
- 
 It is suggested that if you leave the computer for some time during the installation (for example, at end of day), post a note to other MR users to inform them they must wait until the install is completed before they start a scan.


Figure 3-197: Example of a splash screen showing installation progress



9. To exit the Set Time/Date screen, click **File > Quit**.
 - 
 The system reboots once Guided Install is closed.
10. Post successful update and quitting the Date and Time screen, a prompt appears over the Set Time/Date screen instructing you to verify that the Time/Date is correct. Click **Yes** to the prompt and the prompt screen closes. If you need to change the Time/Date. See [System date and time procedure](#) for details.

MR29.1 R04 iserv for Remote Software download


Figure 3-198: Install completed prompt

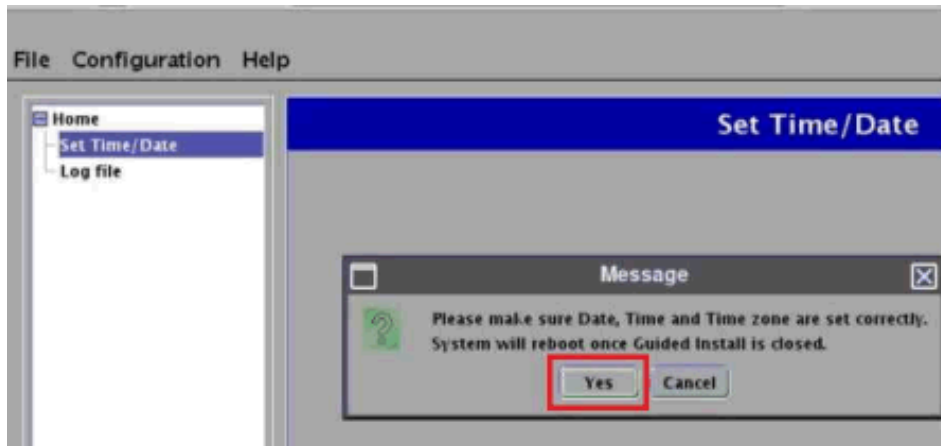

11. When the install is finished, INSTALLED appears under status on the Update Ready to Install screen.

a. Respond to any prompts when the media creation is completed.

Figure 3-199: Installation complete screen

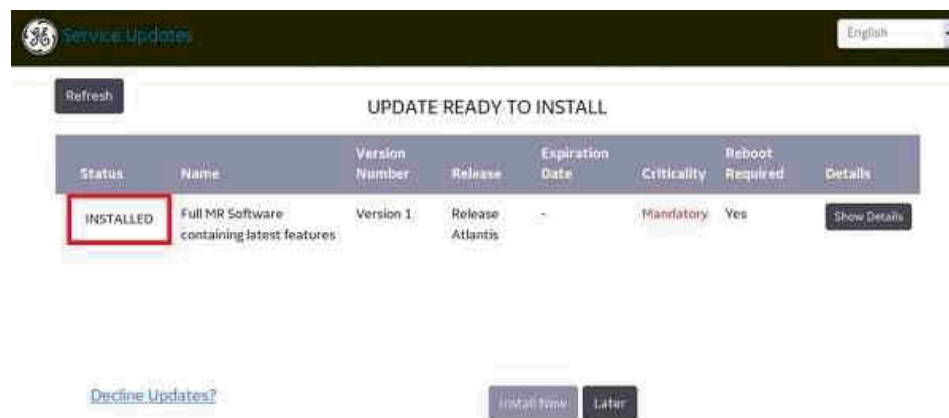


Considerations

Error scenarios



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

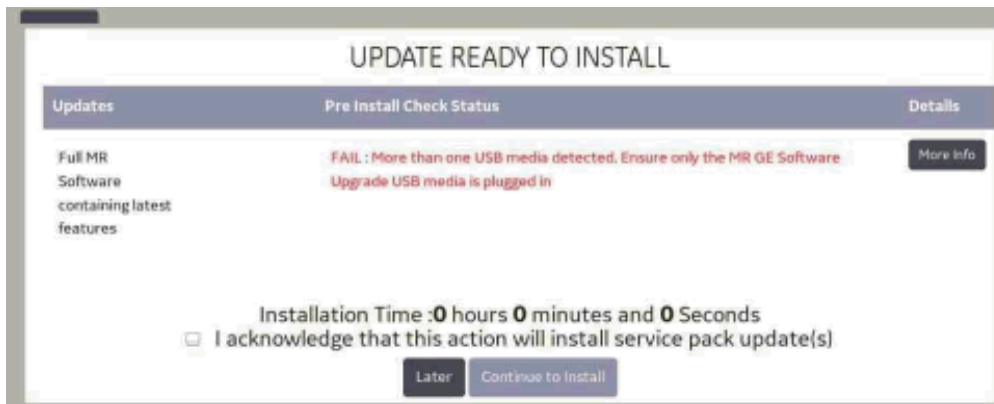Figure 3-200: Example of an error message that appears below the Pre-Install Check Status area

- When the USB device is not connected the following error displays:
"FAIL: No USB media found. Ensure only the MR GE Software Upgrade USB media is plugged in."
- When the wrong USB is detected, the following error displays:
"FAIL: Improper USB media detected. Ensure only the MR GE Software Upgrade USB media is plugged in."
- When more than one USB is detected, the following error displays:
"FAIL: More than one USB media detected. Ensure only the MR GE Software Upgrade USB media is plugged in."

Installing operator documentation through DVD media


Procedure

1. Select the DVD that contains the language for the documentation that is to be installed on the system.

The Operator Manual has multiple language options. Please make sure the media contains the documentation in the site's language of choice.

2. Launch Guided Install. See [Accessing uided Install](#) for more information.
3. Select **Service SW/Insite** from the *Guided Install* content window.

Figure 20. Guided Install Service SW/Insite

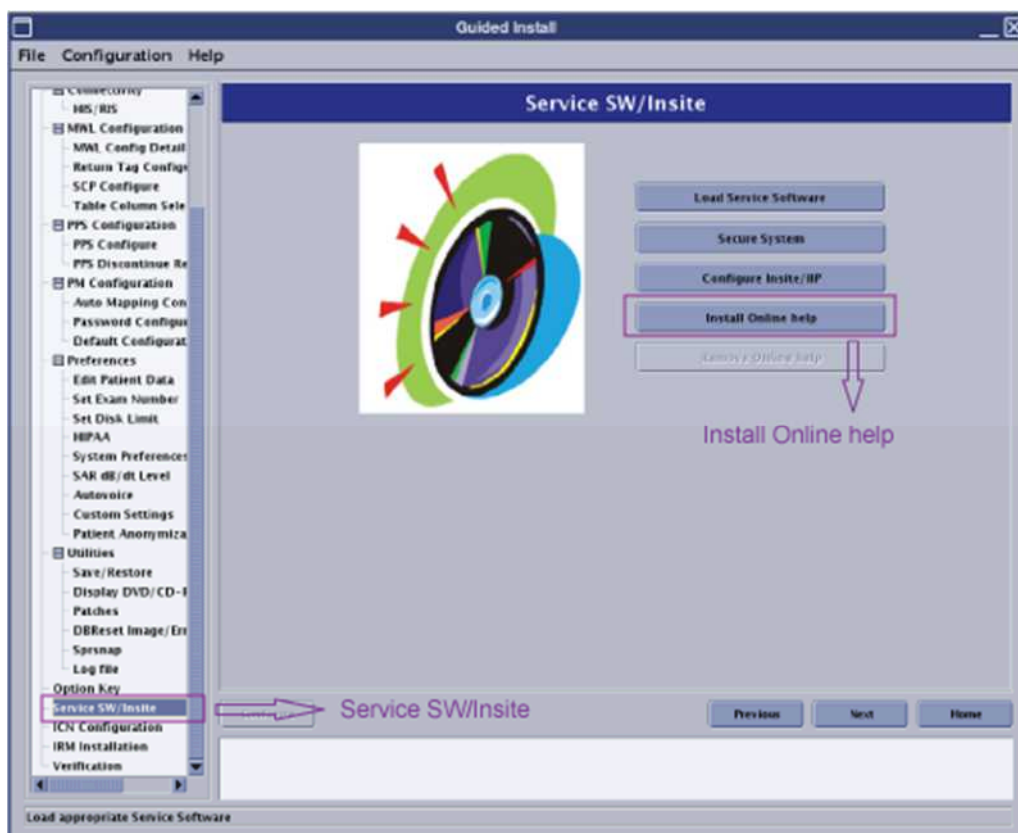

4. Click **Install Online Help**.
5. When prompted to insert the media containing online documentation, insert the DVD containing the selected language into the host computer's DVD drive and then click **OK**.

NOTE: If the Operator Manual is already downloaded through the IRIS Remote Software Download functionality, there is no need for DVD media.

**MR29.1 R04 iserv for Remote Software download**

NOTE: The DVD is available in multiple languages. Make sure that the selected DVD contains the language to be installed at the site.

Result

An *Online Help Installation* dialog box appears.

6. Select the language that is to be used for the online help and click **Install**.

Figure 21. Select language for online help



If the language you want is not on the menu, try another operator manual DVD.

Result

After the installation is complete, a message appears indicating that the installation was successful.

7. Remove the DVD from the drive/port, if applicable.
8. Reboot the system and log on to applications.



9. Click the Online Help tool icon () to make sure the correct Operator Manual package is properly installed and opens as expected.



MR29.1 R04 iserv for Remote Software download

Rev	Author	Reason for Change or Change Control Number	Date
01	Hou Jiannan	Initial Release	See MWS